



Esta es una imagen conceptual que visualiza la función de propuesta de diseño automático de L-CAD.

Resultados óptimos en el diseño de prótesis digitales sin esfuerzo. L-CAD

L-CAD permite un fácil aprendizaje y uso, posibilitando el diseño interno de prótesis.

El flujo de trabajo 3STEP no solo es conveniente, sino que también garantiza los mejores resultados en

el tiempo de diseño más corto basado en la Propuesta de Diseño Automática.

Además, cuenta con una alta compatibilidad al soportar formatos de archivos abiertos como STL, OBJ y PLY.

Creando valor de alto nivel de forma fácil y cómoda.

Potente software CAD de consultorio con el que cualquier persona puede diseñar sin esfuerzo.

L-CAD, más fácil y conveniente.


Interfaz fácil de usar basada en una interfaz de usuario intuitiva

Flujo de trabajo simple de 3 PASOS: Margen > Parámetro > Deformar


Margen: Etapa para fijar la línea de margen de contacto entre la prótesis y el diente.

Parámetro: Etapa de fraguado interno para el espesor y la forma de la prótesis.


Deformar: Etapa de fraguado del material y ajuste óptimo de la posición considerando los dientes adyacentes.

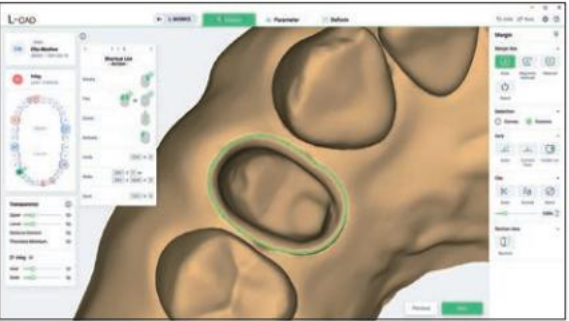

Margen: Detección automática de línea de margen

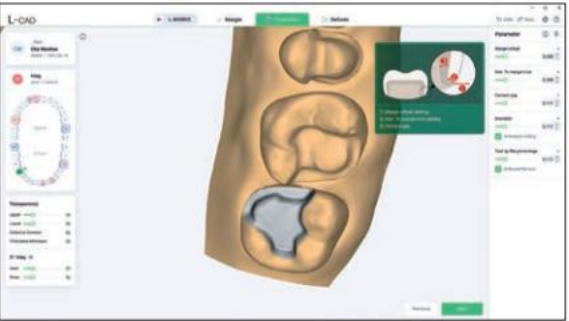

Parámetro: Ajuste del espacio entre los cementos

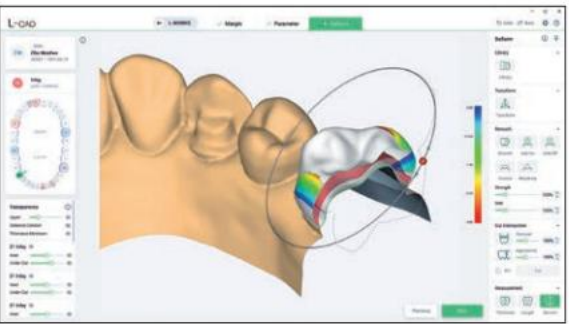

Deformar: Vista en sección transversal del espacio entre el cemento

L-CAD, más rápido y más capaz que cualquier otra cosa.

El tiempo de diseño es breve, pero los resultados son óptimos, con sugerencias inteligentes y procesamiento mediante Diseño Automático Propuesta

Detección automática de líneas de margen

Resultados fáciles y precisos con líneas de margen generadas automáticamente y funciones de edición

Eje de inserción automática

Detecta y sugiere el eje de inserción adecuado para configuraciones óptimas


Recorte automático de dientes

Permite visualizar únicamente el área de trabajo, lo que permite la verificación y edición de la línea de margen sin distorsión de los dientes adyacentes.

Posicionamiento automático de dientes

Sugiere la posición óptima de la prótesis con aprendizaje profundo, con edición de rotación de 360 grados para ajuste de posición o verificación de la parte oclusal en tiempo real.

Parámetro de preajuste

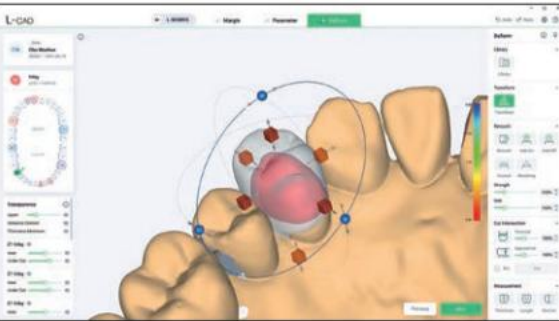

Posicionamiento automático de dientes

Creación de diseño de prótesis simplificada con ajustes preestablecidos

Tipo de indicación y valores del material

Realización de un sistema de un día desde el escaneo hasta la producción de prótesis en un entorno interno

L-CAD, lo aprovecha todo, haciéndolo todo posible.

Admite una biblioteca diversa de indicaciones como

Corona, incrustación, incrustación, carilla, puente

Alta compatibilidad con formatos de archivos abiertos STL, PLY y OBJ

Conexión directa con Lilius PRINT y Lilius

MILL, así como los dispositivos de otros fabricantes, para maximizar la sinergia del tratamiento