

CATÁLOGO LILIVIS CHAIRSIDE 2026

Produce en clínica los casos que sí encajan.

Captura, diseño y fabricación con una configuración adaptada a tu práctica. Formación y soporte de AldraScan.



UN FLUJO, DOS RUTAS DE FABRICACIÓN

01

Capturar

Escaneo intraoral
Lilivis SCAN

02

Diseñar

Diseño digital
con L-CAD

RUTA A

Fresar

Lilivis MILL
LM-100

RUTA B

Imprimir

PRINT, lavado
y poscurado

La ruta de producción se selecciona según la indicación, el material y el protocolo clínico.

MÁS ALLÁ DEL EQUIPO

El coste también está en el flujo de trabajo.

Evalúa tiempos, coordinación, costes por caso y capacidad del equipo antes de decidir qué producir internamente.

COORDINACIÓN

Revisa los tiempos

Identifica las etapas que dependen de terceros y cuándo conviene mantener la colaboración con el laboratorio.

CAPACIDAD

Selecciona los casos

Valora el volumen, la complejidad, los materiales y el tiempo que tu equipo puede dedicar a la producción.

DECISIÓN

Compara el coste total

Incluye equipos, software, consumibles, mantenimiento, personal y etapas de acabado en tu evaluación.

No todo debe hacerse dentro de la clínica.

El objetivo es incorporar los casos que tengan sentido clínico, operativo y económico para tu práctica.

PUNTO DE PARTIDA

Tu situación actual

Casos, equipo disponible, coste externo y necesidades de formación.

IMPLANTACIÓN

Una evolución progresiva

Define un alcance inicial y revisa los resultados antes de ampliar la producción.

IMPLEMENTACIÓN

Más que equipos: un flujo para tu clínica.

Partimos de tus casos, tu equipo actual y tus objetivos para proponer una configuración coherente.

01

Analizar

Casos, volumen, especialidad y objetivos de producción.

02

Aprovechar

Revisar qué parte de tu flujo actual puede mantenerse.

03

Conectar

Comprobar la integración de captura, CAD y fabricación.

04

Validar

Materiales, indicaciones y protocolos de cada aplicación.

05

Instalar

Configurar y poner en marcha el flujo seleccionado.

06

Acompañar

Formación, primeros casos y soporte de uso.



Diseño con L-CAD

Define las funciones, versiones y conexiones necesarias para tu flujo antes de configurar el sistema.

Solicita una evaluación de tu flujo

aldrascan.com/contact



LILIVIS SCAN LS-100

Captura digital para iniciar el flujo.

Exportación STL, OBJ y PLY para trabajar con los datos del escaneo en el software de destino.¹

**Peso****230 g**

Pieza de mano

Campo de visión**15 × 18**

mm, hasta

Profundidad**22 mm**

Hasta

Conexión**USB 3.1**

Cable de 2,0 m

DATOS ABIERTOS**Integración que se comprueba**

Los formatos abiertos no garantizan compatibilidad universal. Verifica la importación, el diseño y la fabricación en tu configuración.

REUTILIZACIÓN**Puntas autoclavables**

Hasta 150 ciclos por punta según el fabricante. Sigue las instrucciones de limpieza, esterilización e inspección.¹

Especificaciones declaradas por el fabricante para LS-100; sujetas a revisión de producto.

1. OSSVIS · Lilivis SCAN: https://www.ossvis.com/en/Product/Lilivis_SCAN.php

LILIVIS MILL LM-100

Convierte casos indicados en producción interna.

Mecanizado húmedo con doble husillo para un flujo de restauración en clínica.¹



Vista con tapa cerrada



Vista con tapa abierta

Velocidad**50.000**rpm, hasta¹**Husillos****Doble**4 motores¹**Repetibilidad****±25 µm**Declarada¹**Instalación****Sin**compresor externo²

Materiales declarados: disilicato de litio, vitrocerámica, cerámica híbrida, zirconia y PMMA.¹

Bloques de hasta 40 mm. Valida la referencia, geometría, herramientas y estrategia CAM antes de producir.¹

8-15 minutos en modo grinding¹

Tiempo de mecanizado declarado, no tiempo clínico total. Varía con el material y el caso. La repetibilidad no equivale a precisión clínica.

1. OSSVIS · Lilivis MILL: https://www.ossvis.com/en/Product/Lilivis_MILL.php

2. Huvitz · Instalación: <https://www.huvitz.com/en/product/lilivis-mill/>

IMPRESIÓN 3D

Impresión, lavado y curado con un protocolo definido.

La resina, la configuración de impresión y el posprocesado deben corresponder a la aplicación prevista.



Tecnología de impresión

Adaptive MSLA con sistema LSA y óptica Fresnel.¹

50 μ m

Tamaño de píxel XY declarado.¹
No equivale a precisión clínica de la pieza.

Lilivis PRINT y CURE · imagen del fabricante³

IMPRIMIR

Lilivis PRINT

LP-100.² Impresión 3D con parámetros adecuados al material y a la indicación.

LAVAR

Lilivis CLEAN

Lavado de las piezas impresas antes del poscurado. Proceso según las instrucciones de la resina.³

POSCURAR

Lilivis CURE

LC-100.² Curado UV con 20 LED superiores y 10 laterales. Tiempo según protocolo.¹

Cada aplicación necesita un material y un protocolo adecuados.

No presupongas que una resina o un ajuste sirve para todas las indicaciones. Comprueba la combinación de impresión, lavado y curado.

1. Ficha técnica: https://www.ossvis.com/en/Product/3D_Print.php

2. Manuales: https://www.ossvis.com/bbs/board.php?bo_table=manual_3DPrint

3. Folleto del fabricante: <https://yenco.it/wp-content/uploads/2026/02/brochure-bundle-print-lilivis-rev03-web.pdf>

SELECCIÓN DEL CASO

El material adecuado para cada aplicación.

La capacidad de mecanizar o imprimir un material no basta para confirmar su indicación clínica.



Antes de producir

Confirma la referencia comercial del material, su indicación, el perfil de fabricación y todas las etapas de acabado.

Las imágenes de piezas no acreditan por sí solas compatibilidad de un material.

Aplicación	Ruta	Condiciones
Coronas y carillas	LM-100 ¹	Material, espesores y estrategia CAM compatibles.
Inlays y onlays	LM-100 ¹	Diseño y preparación adecuados a las instrucciones del material.
Puentes	LM-100 ¹	Extensión y conectores dentro de los límites del material y del bloque.
Modelos, guías y provisionales	Impresión ^{2,3}	Resina indicada para el uso previsto y protocolo completo validado.

Planifica el flujo completo, no solo la fabricación.

Una misma cita solo es viable si el caso, el material y todas sus etapas lo permiten.

1. Aplicaciones LM-100: https://www.ossvis.com/en/Product/Lilivis_MILL.php

2. Aplicaciones PRINT: <https://huvitz.com/en/product/lilivis-print/>

3. Modelos y guías: <https://www.lilivis.net/product/>

SIGUIENTE PASO

Solicita tu estudio Chairside.

Revisemos qué configuración tiene sentido para tus casos, tu volumen y tu forma de trabajar.

PARA PREPARAR EL ESTUDIO

Tu práctica como punto de partida

Casos habituales, equipo actual, coste externo, software y necesidades de formación.

CONOCE EL FLUJO

Solicita una demostración

Consulta la posibilidad de ver captura, diseño o fabricación en una configuración adecuada a tu clínica.


CONTACTO ALDRASCAN

store.aldrascan.com

+34 676 21 65 38

info@aldrascan.com

Alicante, España · Formulario de contacto

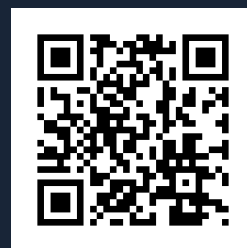

Consulta la tienda

Configuración, formación y soporte

El alcance de equipos, software y servicios se define en la propuesta personalizada. Las indicaciones y los protocolos deben comprobarse en la documentación vigente de cada fabricante.